



筛分仪 AS 200 CONTROL

Worldwide comparability of results

筛分仪 AS 200 CONTROL

配件及选项

Control系列的振动筛分仪可配备多种附件，以满足丰富的应用要求。



| 夹紧装置

使用莱驰紧固装置，可安全、快速、方便地将分析筛夹紧在振动筛上，“舒适型”紧固装置是特别方便用户和节省时间。

| 测试分析筛附件

收集盘、中间盘、中间环和分析筛盖。

| 湿筛配件

带喷嘴的夹紧盖、带出口的收集盘、通气环。

| 筛分辅助

Chain rings, brushes, cubes, balls (e.g. for reducing agglomerations when sieving particles < 100 µm and keeping the mesh free). 链环、刷子、立方体、球（例如，当筛分小于100µm的颗粒并保持筛网自由通过时，用于减少团聚）。

| IQ/OQ 文件

我们为“Control”振动筛分仪提供IQ/OQ文件，以支持客户的IQ/OQ认证。

| 分样仪


只有当样品代表原始材料时，才能得到有意义的结果。分样器产生具有代表性的部分样品，从而确保分析的再现性。

| 超声波清洗机和干燥仪

适用于分析筛的彻底清洁和样品及分析筛的快速、温和干燥。

分析筛分软件EASYSIEVE / EASYSIEVE CFR


EasySieve, the software for particle size analyses, exceeds manual evaluation in many aspects. The software is able to automatically control the necessary measurement and weighing procedures – from the registration of the weight of the sieve up to the evaluation of the data. It is simple and convenient to use and is also available in an FDA 21 CFR Part 11 compliant version.

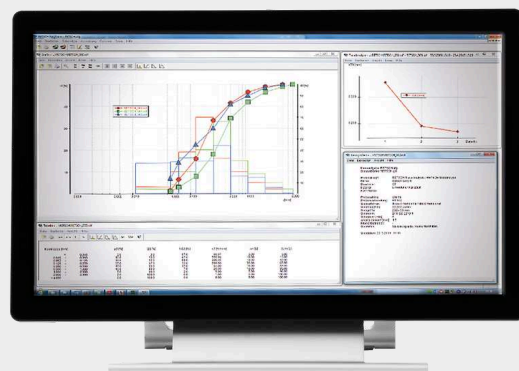


筛分仪 AS 200 CONTROL

典型樣品材料

振动筛分仪常用于水泥熟料、化学品、咖啡、建筑材料、肥料、填料、面粉、谷物、金属粉、矿物、坚果、塑料、沙子、种子、土壤、洗衣粉等的粒度分析。

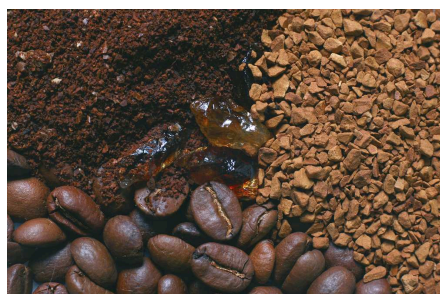

咖啡

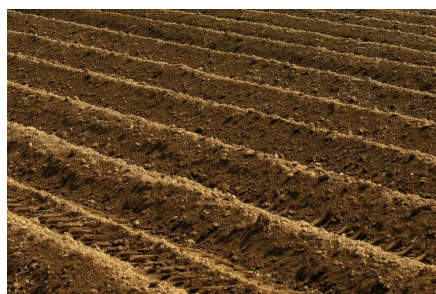

土壤



谷类食物

为了找到最好的解决方案，请访问我们的应用数据库。

筛分仪 AS 200 CONTROL

技术参数

应用	分离、分级、确定粒径
应用领域	农业, 化学 / 合成材料, 医药品, 地质 / 冶金, 工程/电子, 建筑原料, 环境 / 资源回收利用, 玻璃/ 陶瓷, 生物, 食物
样品特征	粉末、松散粒料、悬浮物
测量范围*	20 微米-25 毫米
筛分运动形式	三维抛掷运动
最大负载	3公斤
最大级数	11 / 22
最大筛塔质量	6 kg
振幅或转速	digital, 0.20 – 3.00 mm
Controlled amplitude	是
筛底加速度	1.0-15.1克
时间显示	数字模式, 1-99分钟
间歇驱动	1 - 99 s
可存储运行模式	99
适用于干筛	是
适用于湿筛	是
USB 界面	是
带检验证/可校准	是
可用分析筛直径	100 mm / 200 mm / 203 mm (8")
筛塔最大高度：	620 mm
紧固装置	standard, "comfort", each for wet and dry sieving
防护类型	IP 21
电源数据：	100-240 V, 50/60 Hz
电源接头：	单相
机体尺寸 (宽x高x纵深)	417 x 212 x 384 mm
净重	约35公斤
标准	CE

受样品材料性质和仪器配置/设定的影响