

CEB SERIES

Precision Electronic Balance

CEB系列精密电子天平

为精密称重设计的电子分析天平

CEB系列天平在创新、便捷及良好称量性能之间取得了理想的平衡，集成了日常称重和检测流程所需的应用模式。



■ 产品特点：

- 第二代电磁力传感器
- 标配4种常规单位，可定制单位
- RS232双向接口
- USB-B通讯接口
- 超白导电玻璃，有效减少静电对称重的影响。
- 可定制485协议
- 内置天平自动校准模式，可定时校准

CEB SERIES

Precision Electronic Balance

CEB系列精密电子天平

稳定性、准确性和快速操作 确保日常称重获得优异称重结果

称量的性能

良好的温补性能，为日常复杂环境称重提供稳定可靠的称重结果。

稳定时间

3秒内的稳定时间可满足实验室称重的要求。


校准

内校型号

具有全自动校准功能，通过对环境变化的感应及定时校准确保天平始终处于良好工作状态。

外校型号

传统校准模式，操作员通过手动校准天平，以确保每台天平的精度。

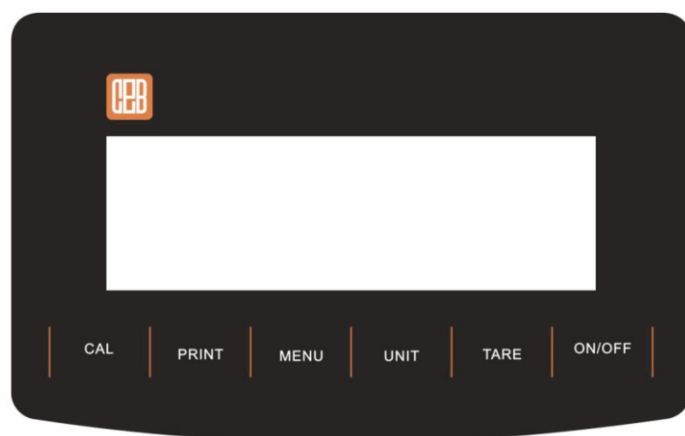

基本称量
根据已选择的称量单位，而获取称量物品的重量。



计件称量
基于样品单重进行计件。



百分比称量
依照预先设定的参考重量，称量计算显示样品重量与参考重量的百分比值。



动物称量/动态称量
称量不稳定的样品。显示天平在一段时间内读取不稳定数值的平均值。



密度测定
测定固体、液体的双重密度测量。



下称称重
底部下称钩称重。



移液器校准
多次测量移液取值并平均，已调整移液器的准确。



累加称量
多次称量结果可一键累加结果。



输出整理
支持多种打印输出模式，可直接将数据传输至EXCELL或其他开放式应用。

CEB SERIES

Precision Electronic Balance

CEB系列精密电子天平

具备实验室所需的连接性和功能特点

RS232C及USB接口

RS232C接口, 双向通讯, 满足电脑控制天平的要求;
USB-B接口, 稳定的USB输出, 使天平满足作为副机的要求。

打印功能

配有输出打印功能, 可连接打印机和电脑;
5种输出模式满足于不同情况下的要求;
并且CEB系列天平可直接将数据传输至EXCEL或者其它
开放式应用模式。

独立双程序模式(十万分之一)

CEB系列内置两套相对独立的程序, 独立的线性数据,
以备不时之需。

移液器校准

通过多次移液器称重, 测算出平均值;
可针对平均值对移液器进行校准。

多单位定制

常规单位有g, oz, ct, mg供客户选择;
特殊行业与要求可按需定制单位, 数量不限。

485协议

可定制modbus协议。

求和称重

多次称重数据可一键求和, 满足应用领域。

密度称重

可搭配密度组件(固体, 液体二选一), 自动测算密度结果。



CEB SERIES

Precision Electronic Balance

CEB系列精密电子天平

外校型号	CEB1035	CEB1055	CEB1085	CEB2035	CEB2055	CEB2085	CEB105	CEB125
内校型号	CEB1035N	CEB1055N	CEB1085N	CEB2035N	CEB2055N	CEB2085N	CEB105N	CEB125N
称量范围	120g/31g	120g/51g	120g/81g	220g/31g	220g/51g	220g/81g	100g	120g
读取精度	0.1mg/0.01mg						0.01mg	0.01mg
稳定时间	约2-3秒						约3秒	约3秒
预热时间	30-60分钟						30-60分钟	30-60分钟
称量单位	g/oz/ct/mg/customizable						g/oz/ct/mg/customizable	
称量的最小称重	0.1mg/0.01mg						0.01mg	0.01mg
重复性	±0.1mg/±0.03mg						±0.03mg	±0.03mg
线性误差	±0.2mg/±0.03mg						±0.03mg	±0.03mg
输出接口	RS232/USB							
秤盘尺寸	φ90mm							
外型尺寸	内箱:430x320x415mm, 外箱:490x380x485mm							
净重	6280g							
电源	AC110V-240V							

外校型号	CEB124	CEB224	CEB324	CEB424	CEB524
内校型号	CEB124N	CEB224N	CEB324N	CEB424N	CEB524N
称量范围	0-120g	0-220g	0-320g	0-420g	0-520g
读取精度	0.1mg				
稳定时间	约1.5秒		约2秒		
预热时间	30-60min				
称量单位	g/oz/ct/mg/customizable				
称量的最小称重	0.1mg				
重复性	±0.1mg		±0.2mg		
线性误差	±0.2mg		±0.3mg		
输出接口	Rs232 标配/USB 标配				
秤盘尺寸	φ90mm				
外型尺寸	内箱:430x320x415mm, 外箱:490x380x485mm				
净重	6280g				
电源	AC110V-240V				

外校型号	CEB503	CEB603	CEB1003	CEB2003
内校型号	CEB503N	CEB603N	CEB1003N	
称量范围	0-520g	0-620g	0-1000g	0-2000g
读取精度	1mg			
稳定时间	1-2秒			
预热时间	30-60分钟			
称量单位	g/oz/ct/mg/customizable			
称量的最小称重	1mg			
重复性	±1mg			
线性误差	±2mg			
输出接口	RS232/USB			
秤盘尺寸	φ90mm			
外型尺寸	内箱:430x320x415mm, 外箱:490x380x485mm			
净重	6280g			
电源	AC110V-240V			


CEB SERIES

Precision Electronic Balance

CEB系列精密电子天平

选件

- 微型打印机
- 密度组件 (固体、液体)
- USB 接口电缆
- RS232 电缆线(9 针)
- 485协议

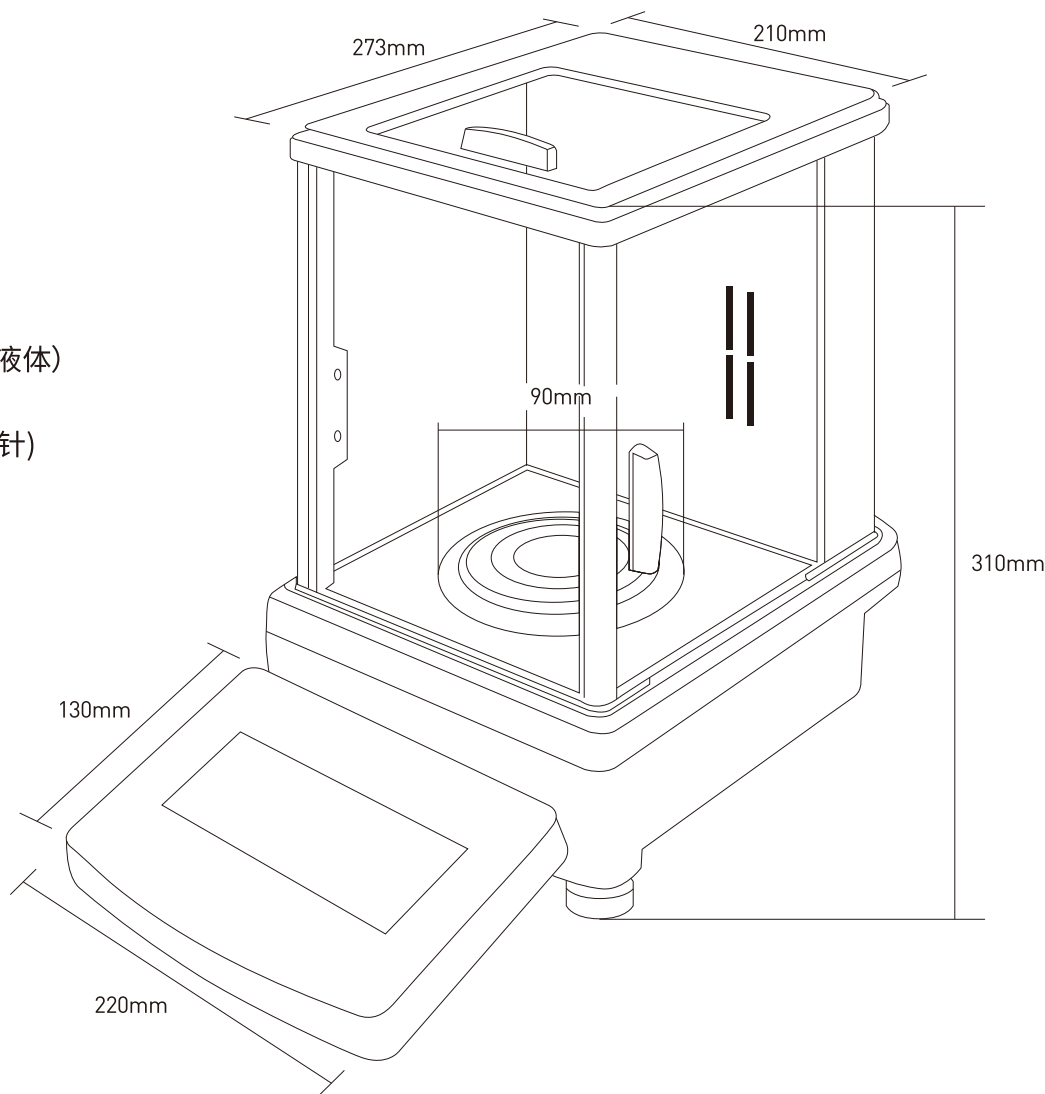

上海衡际科学仪器有限公司

地址:上海市松江区新桥镇南环路506号16幢3楼
电话:021-57658798
邮箱:hengji@hengji.net.cn



宁波金诺天平仪器有限公司

地址:浙江省宁波市余姚市磨刀桥路63-8号
电话:0574-62822123
邮箱:jinnuo@nbjinnuo.com